

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za uporabnike. Medicinski pripomoček je na voljo brez recepta. Da vam bo kar najboljše koristil, ga uporabljajte pri navedenih indikacijah.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se po določenem času simptomi še pojavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

Proktis-M[®]

NATRIJEVA SOL HIALURONSKE KISLINE, 5 mg
Svečke

SESTAVA

Natrijeva sol hialuronske kisline, 5 mg; azijski vodni popnjak; ognjič; aloje vera; čajevec; polysintetični gliceridi; BHT.

V KAKŠNI OBLIKI JE

PROKTIS-M je svečka za rektalno uporabo. V škatli je 10 svečk po 2 g.

KAJ JE IN KAKO SE UPORABLJA

Svečke PROKTIS-M učinkujejo zaradi vsebnosti hialuronske kisline. To je mukopolisaharid, ki je v večjih količinah prisoten v mnogih telesnih tkivih. Hialuronska kislina pripomore k izgrajevanju tkiv tako, da jim povrne čvrstost, prožnost in elastičnost. Številne klinične študije so pokazale, da hialuronska kislina lahko pospeši in izboljša obnovo povrhnjice in celjenje tkiva.

INDIKACIJE

Dodatna pomoč pri obnavljanju analno-rektalnega kanala po proktoloških operacijah; notranjih in zunanjih hemoroidih; proktitisu; kriptitisu; analnih ragadah; fisurah; perianalnih fistulah.

KDAJ NAJ GA NE BI UPORABLJALI

Ne uporabljajte v primeru individualne preobčutljivosti za katerokoli sestavino izdelka.

Nosečnost in dojenje

V teh primerih je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Vpliv na upravljanje vozil in strojev


Posebni varnostni ukrepi niso potrebni.

MEDESEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI IZDELKI

Medsebojna delovanja z drugimi izdelki niso znana, zato je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, preden uporabite svečke PROKTIS-M v kombinaciji z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili za rektalno uporabo.

KAKO SE UPORABLJA

Odstranite svečko tako, da razmaknete in potegnete narazen oba konca folije na vrhu ovoja. Svečko vstavite v danko. Umijte si roke pred uporabo medicinskega pripomočka in po njej.

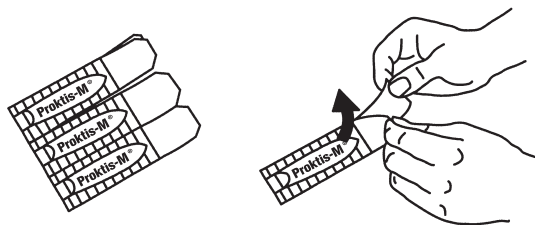

KDAJ IN KAKO DOLGO

Uporabite eno svečko na dan, po možnosti zvečer pred spanjem, ali po navodilu zdravnika. Trajanje uporabe je odvisno od razvoja simptomov; če je potrebno, so svečke PROKTIS-M primerne tudi za dolgotrajno uporabo.

NEŽELENI UČINKI

Uporaba kateregakoli izdelka za lokalno uporabo, posebno dolgotrajna, lahko povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom o ustrezni terapiji. Če se pojavijo drugi neželeni učinki, o tem obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

OPOZORILA

Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Ne zaužijte izdelka.

ROK UPORABE, SHRANJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE

Rok uporabe se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, oziroma če je embalaža odprta ali poškodovana. Medicinski pripomoček shranjujte zaščiten pred svetlobo in toploto, najbolje pri temperaturi od 4 do 25 °C. Medicinskih pripomočkov naj ne bi odvrgli v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke; o načinu odstranjevanja medicinskih pripomočkov, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte s svojim farmacevtom. To bo pripomoglo k zaščiti okolja.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK  0373

 **Výrobce/Výrobca: FARMA-DERMA s.r.l.**
Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITÁLIE/ TALIANSKO (ITALY)

Uvoznik: DR. GORKIČ d.o.o.
Obrtiška ul. 11, 1370 Logatec, SLOVENIJA